



جهاز استنشاق الرذاذ اللطيف SOFT MIST

RESPIMAT - المخصص للاستخدام اليومي

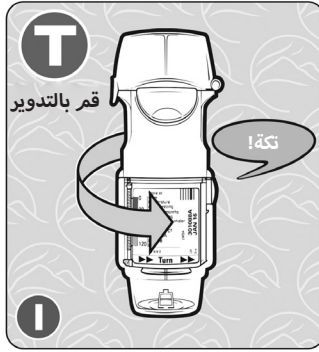

حافظ على الغطاء مغلقاً وقم بتدوير القاعدة

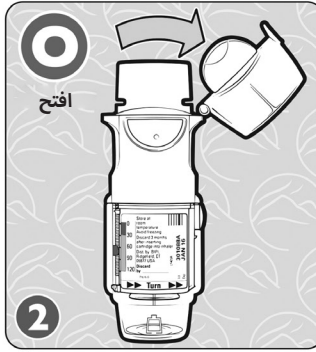


قم ببطي الغطاء لفتحه




اخرج النفس (زفير)



ابدأ بنفس بطيء، اضغط على الزر، احبس النفس

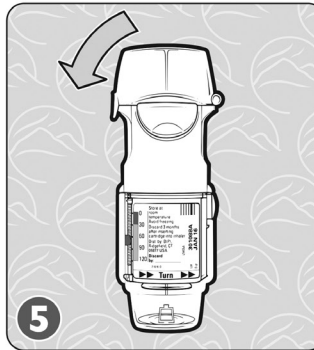

أغلق الغطاء

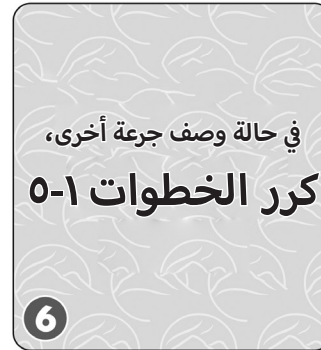

تذكير

معلومات هامة

ملحوظة: ضع أداة الفم بين أسنانك وأغلق شفطيك.

الجهاز فارغ؟: القاعدة بها أداة تتبع الجرعة - «» تعني إنها فارغة. القاعدة سوف تغلق. تخلص منها.

انتهت الصلاحية؟: تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على الجهاز.

تذكيرات: في حالة عدم استخدام «Respimat» لمدة أسبوع واحد مرة واحدة أساسية (انظر الجانب الخلفي). في حالة عدم استخدام «Respimat» لمدة ٣ أسابيع ٣ مرات أساسية (انظر الجانب الخلفي). لا تجعل الرذاذ يلامس العين. **التنظيف:** امسح أداة الفم باستخدام منديل أو قطعة قماش جافة.

تم تصميم هذه المادة لأغراض تعريفية، ولا تغني عن المشورة الطبية و/أو التعليمات الطبية و/أو العلاج الطبي. إذا كان لديك أسئلة محددة، يُرجى استشارة طبيبك أو الرجوع إلى أحد أخصائيي الرعاية الطبية ذوي الصلة.

تم تطوير الرسوم التوضيحية بواسطة الخدمة المجتمعية لعلاج ربو الأطفال، www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

للمزيد من المعلومات حول أدوية الاستنشاق والعروض التوضيحية للأجهزة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:


www.ucalgary.ca/asthma




جهاز استنشاق بخر لطيف

RESPIMAT - التحميل والتحضير


تحميل: مطلوب لمرة واحدة، قبل أول استخدام

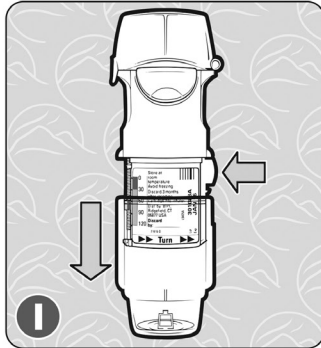

1 اضغط على ماسكة الأمان واسحب القاعدة الشفافة.

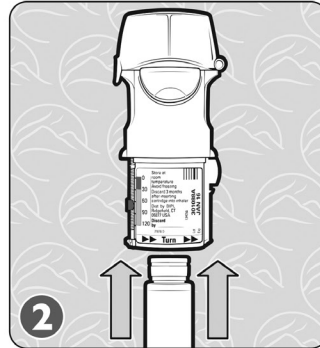


2 أدخل طرف الخرطوشة الضيق حتى تسمع صوته تكة، اضغط على السطح الصلب بإحكام للتأكد من تثبيتته في موضعه.

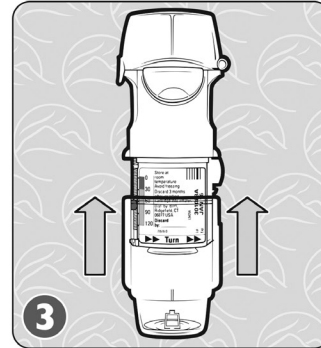


3 أعد تركيب القاعدة الشفافة

تحضير الخرطوشة: إجراء مطلوب عند الاستخدام لأول مرة، اتباع الخطوات الخاصة بتدوير الجهاز وفتحه والضغط عليه

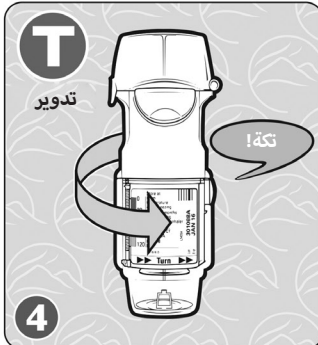


4 تدوير
أدر القاعدة حتى تسمع صوت «تكة»

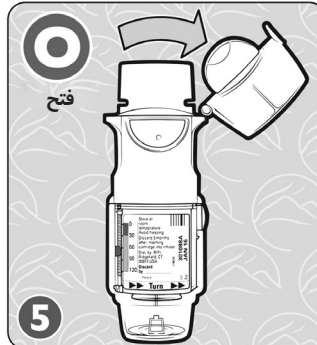

5 فتح
قم بطي الغطاء لفتحه



6 ضغط
أسّس لأسفل، واضغط على الزر

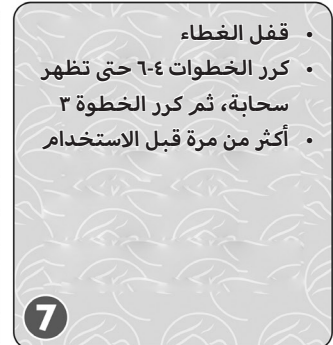

7 تذكير

- قفل الغطاء
- كرر الخطوات 1-4 حتى تظهر سحابة، ثم كرر الخطوة 3 أكثر من مرة قبل الاستخدام

ملاحظة: في حالة عدم استخدام Respimat لمدة أسبوع، قم بتحضيره مرة واحدة (الخطوات 1-4) في حالة عدم استخدام Respimat لمدة 3 أسابيع، قم بتحضيره 3 مرات (الخطوات 1-4) حافظ دومًا على غلق الغطاء عند تدويره لتجنب تنشيط الجهاز دون قصد. تجنب إدخال البخر في عينيك.

ملاحظة:

