



INHALATEUR SOFT MIST

RESPIMAT - POUR USAGE QUOTIDIEN

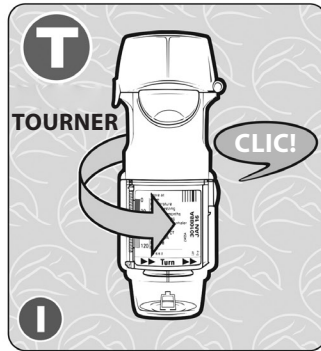


1 GARDEZ LE CAPUCHON FERMÉ. TOURNÉZ LA BASE

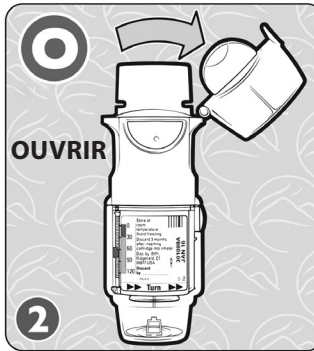


2 BASCULEZ LE CAPUCHON POUR OUVRIR



3 EXPIREZ À FOND

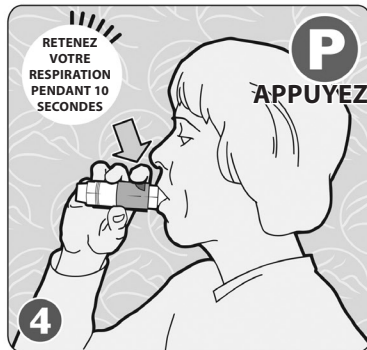

4 COMMENCEZ À INSPIRER LENTEMENT, APPUYEZ SUR LE BOUTON, CONTINUEZ D'INSPIRER

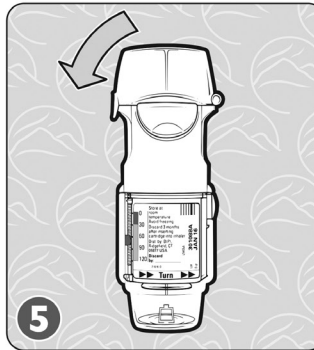

5 FERMEZ LE CAPUCHON

6 Si une autre bouffée est prescrite, répétez les étapes 1 à 5

RAPPEL

INFORMATION IMPORTANTE

Remarque : Placez la pièce buccale entre vos dents et resserrez vos lèvres.

Vide? La base a un dispositif de suivi des doses – « 0 » signifie que le dispositif est vide. La base va se bloquer. Jetez-le.

Date de péremption dépassée? Vérifiez la date de péremption sur le dispositif.

Rappels : Si le Respimat n'a pas été utilisé pendant une semaine, **amorcez-le 1 fois** (voir au dos).
Si le Respimat n'a pas été utilisé pendant 3 semaines, **AMORCEZ-LE 3 fois** (voir au dos).
Ne pas pulvériser de brouillard dans les yeux.

Nettoyage : Essuyez la pièce buccale avec un mouchoir en papier ou un tissu sec.

Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information. Il ne doit pas remplacer un avis médical, les consignes d'un médecin ou un traitement. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé approprié.

Les illustrations ont été élaborées par le service communautaire d'asthme pédiatrique, www.ucalgary.ca/icancontrolasthma


Pour plus d'information sur les médicaments inhalés et des démonstrations sur les dispositifs, visitez notre site Web :
www.ucalgary.ca/asthma




INHALATEUR SOFT MIST

RESPIMAT – CHARGEMENT ET AMORÇAGE


CHARGEMENT : À NE FAIRE QU'UNE SEULE FOIS, AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

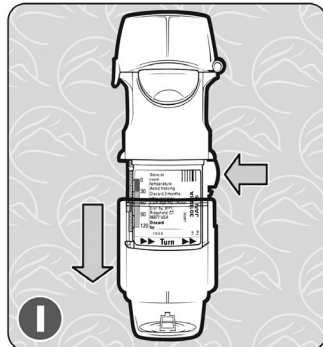

1
APPUYEZ SUR LE CRAN DE SÉCURITÉ ET TIREZ SUR LA BASE TRANSPARENTE POUR L'ENLEVER.

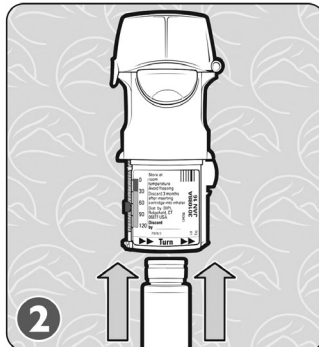


2
INSÉREZ LE CÔTÉ ÉTROIT DE LA CARTOUCHE POUR L'ENCLIKER. APPUYEZ FERMEMENT CONTRE UNE SURFACE DURE POUR VOUS ASSURER QUE LA CARTOUCHE EST BIEN EN PLACE.

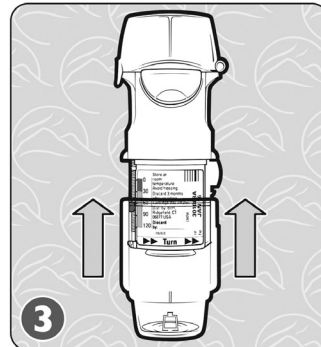

3
REMETTEZ LA BASE TRANSPARENTE EN PLACE.


AMORÇAGE DE LA CARTOUCHE : NÉCESSAIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION; ALLEZ AU T.O.P.

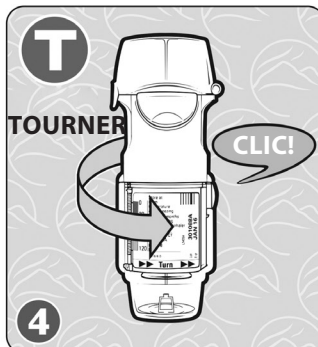


4
TOURNEZ LA BASE JUSQU'AU « CLIC » SONORE



5
FAITES BASCULER LE CAPUCHON

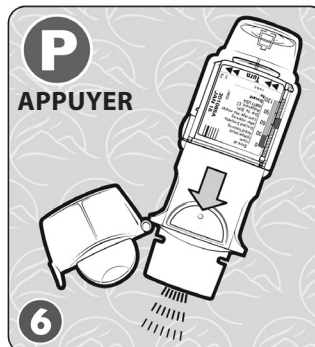

6
POINTEZ VERS LE BAS ET APPUYEZ SUR LE BOUTON

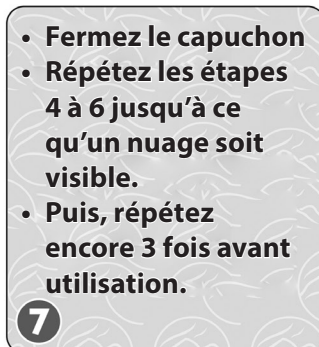

7
RAPPEL

Remarque : Si le Respimat n'a pas été utilisé pendant une semaine, AMORCEZ-LE 1 FOIS (étapes 4 à 6).

Si le Respimat n'a pas été utilisé pendant 3 semaines, AMORCEZ-LE 3 FOIS (étapes 4 à 7).

Maintenez toujours le capuchon fermé quand vous tournez la base pour éviter une activation accidentelle du dispositif.

Ne dirigez pas le brouillard vers vos yeux.

