



건조 분말 흡입기

제뉴에어

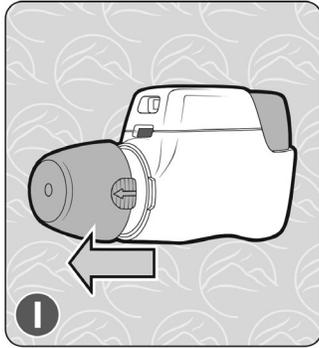

1 캡을 분리합니다

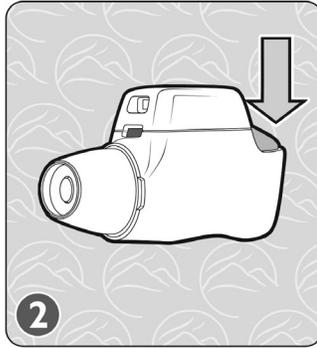

2 초록색 버튼을 누릅니다



3 초록색 버튼에서 손을 뗍니다



4 숨을 내쉽니다




5 강하고 깊게 숨을 들이마십니다



6 표시등 창이 여전히 초록색이면 4~5단계를 반복하세요.

알림

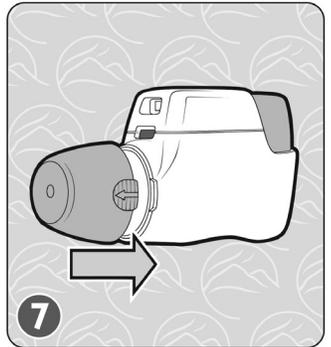

7 캡을 다시 장착합니다

중요 정보

- 참고:** 이빨 사이에 마우스피스를 놓고 입술을 오므리세요.
- 잔량 확인:** 창에 잔량을 나타내는 숫자가 표시됩니다. '0'이 표시되면 약물을 다 쓴 것이므로, 장치를 버리세요.
- 유통기한 확인:** 장치 뒤쪽에 표시된 유통기한을 확인하세요.
- 알림:** 장치를 건조한 상태로 유지하세요.
장치 안으로 숨을 불어넣지 마세요.
사용 후에는 캡을 다시 장착하세요.
- 세척:** 마른 휴지나 천으로 마우스피스를 닦으세요.
12시간마다 복용하세요.
깊게 숨을 들이마시면 색상 창이 빨간색으로 변합니다.
여전히 초록색이면 초록색 버튼에서 손을 떼고 4~5단계를 반복하세요.

이 자료는 오직 정보를 제공할 목적으로 제작되었으므로 의료 자문, 지침 및/또는 치료 대신 사용해서는 안 됩니다. 구체적인 질문이 있는 경우 의사나 적절한 의료 전문가에게 문의하세요.

삽화 제작: 지역 사회 소아 천식 서비스(www.ucalgary.ca/icancontrolasthma)

흡입 약물 및 장치 시연에 대한 자세한 내용은 웹사이트 (www.ucalgary.ca/asthma)에서 확인하세요



최신 호흡기 지침
준수

