


INHALER NG TUYONG PULBOS

BREEZHALER

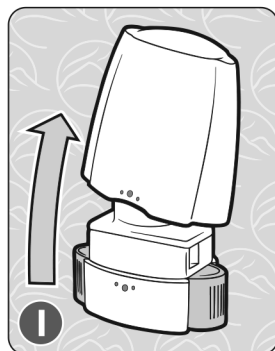


1

HILAHIN ANG TAKIP



2

IFLIP ANG PAMASOK SA BIBIG PARA BUKSAN

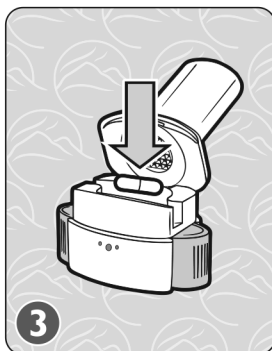

3

IPASOK ANG KAPSULA



4

IFLIP ANG PAMASOK SA BIBIG PARA SARHAN



5

IPRESS AT PALAYAIN

Isang beses



6

HUMINGA PALABAS




7

MABILIS NA MALALIM NA BUNTUNGHINGA AT PIGILAN

10
segundo na
pigilan ang
hininga


Pakinggan
ang ugong

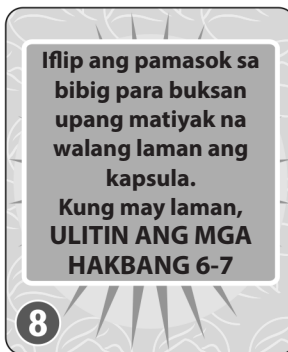

8

PAALALA

Iflip ang pamasok sa bibig para buksan upang matiyak na walang laman ang kapsula. Kung may laman, ULITIN ANG MGA HAKBANG 6-7

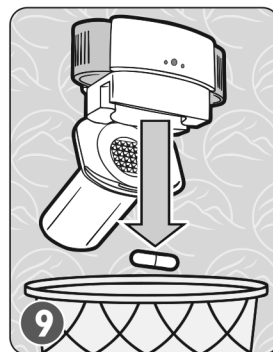

9

ITAPON

MAHALAGANG IMPORMASYON

Nag-expire?: Tingnan ang petsa ng expiration sa kahon o sa pakete na lalagyan ng mga kapsula.

Mga Paalala: Panatiliing tuyo ang Breezhaler. Punasan lamang ng tuyong retaso.
Huwag hihinga paloob sa device.
Ang mga kapsula ay sensitibo sa liwanag, moisture, at mga extreme na temperatura.
Tiyakin na ISA-ISA lamang ang pag-aalis sa pakete ng kapsula.
Huwag hahawakan ang mga kapsula na nagamit na.
Kung malagyan ng tuyong pulbos ang iyong mga kamay, tiyakin na mahuhugasan mong mabuti ang iyong mga kamay.
Ang device na Breezhaler ay puwedeng irecycle.

Ang materyal na ito ay dinisenyo para lamang sa pagbibigay ng impormasyon. Hindi ito dapat gamitin bilang pamalit sa medikal na payo, panuto at/o paggamot. Kung mayroon kang mga partikular na tanong, mangyaring komunsulta sa iyong doktor o sa tamang propesyunal sa pangangalaga ng kalusugan.

Ang mga paglalarawan ay binuo ng Community Pediatric Asthma Service, www.ucalgary.ca/icaconstrolasthma

Para sa dagdag na impormasyon sa mga medikasyong ini-inhale at mga demo ng device, bisitaghin ang aming website sa: www.ucalgary.ca/asthma

